

Einstieg leicht gemacht.

Elmasonic Easy



Elmasonic Easy



So vielseitig die Einsatzgebiete, so einheitlich die Funktion – einfach und zuverlässig. Das ist Easy.

Der leistungsstarke Allrounder.


Elmasonic Easy ist die Serie für Einsteiger. Sie zeichnet sich durch Umweltfreundlichkeit und eine intuitive Bedienung aus. Während der neue *eco Modus* einen energieeffizienten und lärmreduzierten Betrieb ermöglicht, profitiert der Anwender im jederzeit aktivierbaren *dynamic Modus* davon, dass auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernt werden und eine optimale Schallfeldverteilung im Reinigungsbad gegeben ist.

Die Reinigungsanwendung steht im Fokus. Eine speziell von Elma abgestimmte Reinigungsschemie sorgt für das optimale Reinigungsergebnis. Praktisches Zubehör wie Körbe, Halterungen, Einsätze, Trockner oder Lärmschutzboxen unterstützen den Anwender bei typischen und vertrauten Reinigungsaufgaben und machen Ultraschallgeräte der Easy Serie so zu kleinen – aber hochfunktionalen – Kraftpaketen.



Highlight

MAXIMALER
NUTZEN

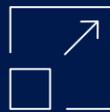

Entwickelt für

- Uhrmacher, Juweliere und Uhren- & Schmuckateliers
- Metallverarbeitende Betriebe
- Hersteller industrieller Bauteile
- Werkstätten und Reparaturshops
- Forschungs- & Entwicklungslabore
- Industriell-analytische Labore



Reinigt

- Schmuckstücke
Ohrringe und Armbänder (mit und ohne Edelsteine)
- Uhrenkomponenten
Bänder, Schließen und Gehäuse
- Industrielle Komponenten & Bauteile
Vergaser und Filter
- Laborinstrumentarium
Glaspipetten und Becher- & Reagenzgläser



Entfernt

- Verharzungen
- Klebereste
- Öle und Fette
- Schleif- und Polierpasten
- Späne
- Flussmittel
- Organische Verunreinigungen
Fingerabdrücke und Trageschmutz



Elmasonic Easy

Klare Linien. Kompakte Bauweise. Leistungsstark. Einsteigerorientiert.

Für jede Anwendung.

Auch wenn die Easy Serie ausdrücklich Einsteiger anspricht, macht sie doch keinerlei Kompromisse bei der Qualität. Trotz der Reduktion auf wesentliche Funktionselemente, die bei einer Ultraschallreinigung notwendig sind, besitzt der Anwender ein leistungsstarkes Gerät für viele Einsatzzwecke. Die Serie umfasst

insgesamt 14 Gerätevarianten (115/230 V) mit einem Badvolumen von 0,8 bis 69,1 Litern. Bis zu einem Badvolumen von 3 Litern gibt es Geräte mit und ohne Heizung. Ab einem Volumen von 3 Litern verfügen alle Geräte über eine Heizung. Zusätzlich sind alle Geräte ab 6* Litern mit einem Ablauf ausgestattet.

* Gilt nicht für Elmasonic Easy 50R

Technische Daten

Mechanisch

| Elmasonic Easy | 10 | 10H | 20 | 20H | 30 | 30H | 40H | 60H |
|---|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| Gesamtvolumen V (l) | 0,9 | | 1,6 | | 2,7 | | 3,9 | 5,9 |
| Gerät-Außenmaße B / T / H (mm) | 235 / 130 / 200 | | 215 / 190 / 230 | | 305 / 190 / 230 | | 305 / 190 / 280 | 370 / 225 / 280 |
| Öffnungsmaße B ₂ / T ₂ (mm) | 190 / 85 | | 150 / 135 | | 235 / 135 | | 235 / 135 | 300 / 150 |
| Wanne-Innenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁ (mm) | 185 / 80 / 55 | | 140 / 125 / 95 | | 220 / 120 / 95 | | 215 / 115 / 145 | 280 / 130 / 145 |

| Elmasonic Easy | 100H | 120H | 180H | 300H |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamtvolumen V (l) | 9,5 | 12,9 | 17,8 | 27,5 |
| Gerät-Außenmaße B / T / H (mm) | 380 / 315 / 280 | 380 / 315 / 280 | 405 / 375 / 330 | 575 / 375 / 330 |
| Öffnungsmaße B ₂ / T ₂ (mm) | 295 / 235 | 295 / 235 | 325 / 295 | 500 / 295 |
| Wanne-Innenmaße B ₁ / T ₁ / H ₁ (mm) | 280 / 220 / 145 | 275 / 215 / 195 | 300 / 270 / 195 | 475 / 270 / 195 |

Elektrisch

| Elmasonic Easy | 10 | 10H | 20 | 20H | 30 | 30H | 40H | 60H | 100H | 120H | 180H | 300H |
|-------------------------------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Ultraschallleistung eff. ± 10 % (W) | 30 | | 35 | | 80 | | 120 | 150 | 200 | | 200 | 300 |
| Heizleistung (W) | 0 / 60 | | 0 / 120 | | 0 / 200 | | 200 | 400 | | 800 | | 1200 |

Produktfamilie

Elmasonic Easy 180H

Gesamtvolumen (V): 17,8 l
Ultraschallleistung (W): 200



Elmasonic Easy 10

Gesamtvolumen (V): 0,8 l
Ultraschallleistung (W): 30



Elmasonic Easy 300H

Gesamtvolumen (V): 27,5 l
Ultraschallleistung (W): 300



PERFEKT FÜR
EINSTEIGER



Highlights

Der Umwelt zu Liebe.

Mit dem neuen *eco Modus* ist eine leisere und materialschonende Reinigung möglich und es verlängert die Lebensdauer der Wanne. Bei hartnäckigsten Verschmutzungen kommt der *dynamic Modus* mit seiner optimierten Schallfeldverteilung im Reinigungsbad zum Einsatz.

Den Anwender im Blick.

Das übersichtliche Bedienfeld macht die Ultraschallreinigung einfach. Optische und akustische Signale beim Erreichen der Reinigungsdauer oder der Reinigungstemperatur sowie bei Fehlern unterstützen den Anwender. Das Gerät schaltet sich beim Erreichen einer Badtemperatur von 90°C ab.

Schnellstart nach Sicherheitsabschaltung.

Erfolgt keine Bedienung durch den Anwender, schaltet sich das Gerät nach acht Stunden ab. Die LEDs erlöschen und das Gerät geht in den Standby Modus. Nach der Abschaltung oder einem möglichen Stromausfall wacht das Gerät mit einem Tastendruck oder einer Drehschalter-Bewegung wieder auf.

Elmasonic Easy

Fair im Preis. Beachtlich im Output. Das funktioniert.

Mit der Elmasonic Easy Serie gelingt der bedienerfreundliche Einstieg in die Ultraschallreinigung. Dabei überzeugt nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die optionale Reinigungsschemie und das umfangreiche und praktische Zubehör.

Funktionen

Intuitive und klare Bedienung.

Reinigungsdauer und -temperatur werden einfach eingestellt und der Reinigungsprozess wird intuitiv auf dem Bedienfeld gestartet und gestoppt. Der Wechsel des Ultraschallmodus geschieht ebenso einfach über das Bedienfeld.

Praktisches Zubehör.

Das anwendungsorientierte Zubehör umfasst Körbe, Halterungen, Einsätze, Lärmschutzboxen, Trockner und Kühlschlangen und dient für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben.

Optimale Reinigungsschemie.

Die von Elma entwickelte Reinigungsschemie ist für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben in verschiedenen Branchen optimiert und sorgt für das optimale Reinigungsergebnis.



Elmasonic Easy

Programmgesteuert Proben aufbereiten – reproduzierbare Ergebnisse erzielen.

Probenaufbereitung einfach gemacht.

Schwerpunkte dieser Elmasonic Easy R-Serie sind die Prüfsiebreinigung, die HPLC-Lösemittelentgasung und weitere Laboranwendungen wie das Lösen schwerlöslicher Substanzen, die Emulsionsherstellung und Reaktionsbeschleunigung. Anwender wählen dabei aus unterschiedlichen Programmen „sieve cleaning“,

„degas“ oder „sample preparation“, um die richtigen Ultraschallparameter zu aktivieren. Durch diese können alle Vorgänge leicht standardisiert und wiederholt werden, was die Laborarbeit enorm erleichtert. Die richtige Befüllung der Geräte wird durch Füllhöhenmarkierungen in der Wanne vereinfacht.

Technische Daten Mechanisch

| Elmasonic Easy | 50R | 350R |
|---|-----------------|-----------------|
| Gesamtvolumen V (l) | 6,3 | 69,1 |
| Gerät-Außenmaße B / T / H (mm) | 345 / 295 / 345 | 675 / 795 / 505 |
| Wanne-Innenmaße D / H ₁ (mm) | 240 / 140 | 595 / 245 |
| Gewicht (kg) | 5,0 | 21,0 |

Elektrisch

| Elmasonic Easy | 50R | 350R |
|------------------------------------|-----|------|
| Ultraschallleistung eff. ± 10% (W) | 150 | 600 |

Produktfamilie

Elmasonic Easy 50R

Gesamtvolumen (V): 6,3 l
Ultraschallleistung (W): 150



Elmasonic Easy 350R

Gesamtvolumen (V): 69,1 l
Ultraschallleistung (W): 600

PERFEKT FÜR
LABORARBEIT





Elmasonic Easy

Prüfsiebe reinigen und Proben aufbereiten – ganz Easy.

Die leistungsstarken Rundgeräte Elmasonic Easy 50R und Elmasonic Easy 350R finden Ihren Einsatz in der Laborumgebung, wo Proben zuverlässig aufbereitet, Flüssigkeiten komplett entgast und Prüfsiebe gründlich gereinigt werden müssen.

Highlights

Proben zuverlässig aufbereiten.

Mit der „*sample preparation*“ werden Standardaufgaben wie Mischen, Lösen, Dispergieren und Emulgieren durchgeführt.

Prüfsiebe gründlich reinigen.

Mit „*sieve cleaning*“ kann der Anwender Prüfsiebe schnell und effektiv reinigen und damit sichere und reproduzierbare Analyseergebnisse ermöglichen.

Flüssigkeiten automatisch entgasen.

Mit „*degas*“ können Flüssigkeiten wie z.B. HPLC-Lösemittel schnell entgast werden. Zusätzlich bietet der „*Auto-degas-Modus*“ einen automatischen Entgasungszyklus der beispielsweise bei neu angesetzten Reinigungsflüssigkeiten zur Anwendung kommt.

Funktionen

Intuitive und klare Bedienung.

Die Reinigungsdauer wird einfach eingestellt und der Reinigungsprozess intuitiv auf dem Bedienfeld gestartet und gestoppt.

Praktisches Zubehör.

Das anwendungsorientierte Zubehör umfasst Körbe, Halterungen und Einsätze, um unterschiedlichste Aufbereitungs- und Reinigungsaufgaben zuverlässig zu erfüllen.


Optimale Reinigungschemie.

Die von Elma entwickelte Reinigungschemie ist für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben in verschiedenen Branchen optimiert und sorgt für das optimale Reinigungsergebnis.



MEHR AUSWAHL


Technik von Elma ist weit mehr als nur die reinen Geräte zur Reinigung. Mit unserem Zubehör können Sie die Easy Serie ausbauen – einfach und praktisch.

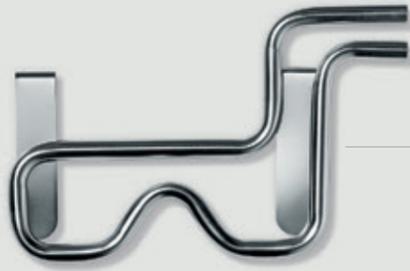

Kühlschlange
Material: Edelstahl




Schmuckhalter
Material: Kunststoff

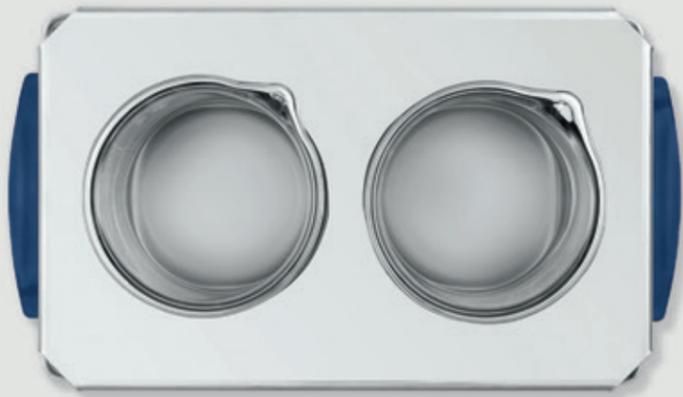

Einsatzdeckel
Material: Edelstahl

Körbe
mit beschichteten Griffen
Material: Edelstahl

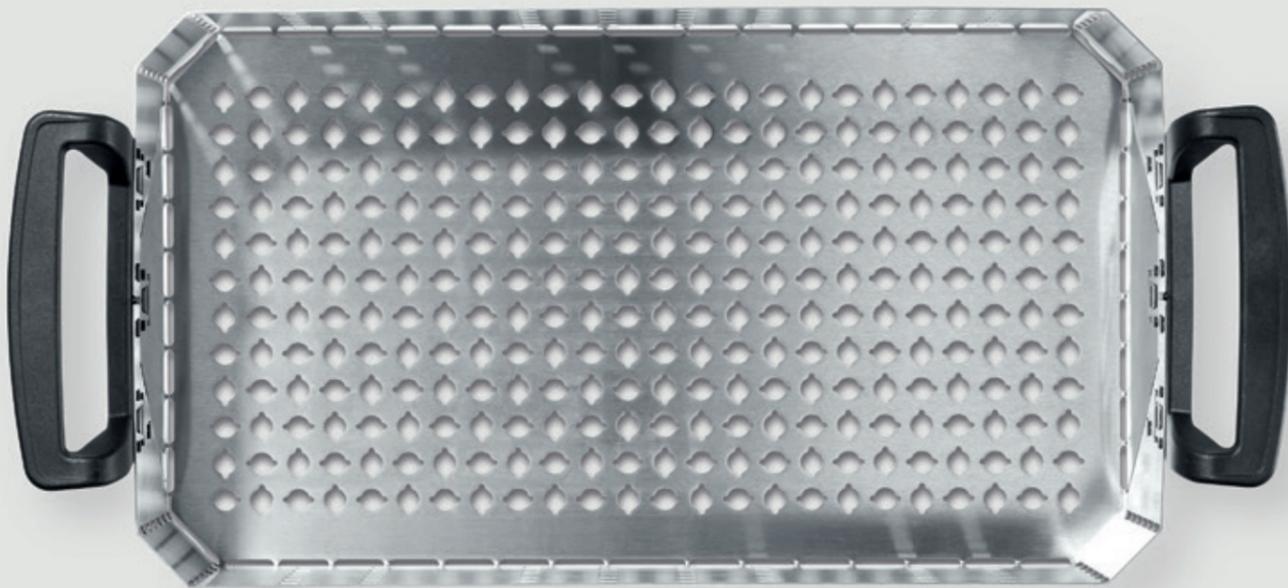

Elmasonic Easy Zubehör

Kluge Ideen. Sinnvolle Lösungen. Innovative Produkte. Einfach praktisch.

Für die verschiedensten Reinigungsaufgaben in unterschiedlichen Branchen – beispielsweise Uhren, Schmuck, Optik, Labor oder Industrie – bietet Elma ein umfangreiches Sortiment an anwenderorientiertem Zubehör.

EINFACH
MEHR



KÖRBE

Die Körbe aus Edelstahl sorgen dafür, dass sich das Reinigungsgut im Ultraschallbad im optimalen Schallfeld befindet und der Anwender nicht mit der Reinigungsschemie in Kontakt kommt.



HALTERUNGEN

Praktische Halterungen dienen zur Aufnahme von unterschiedlichen Reinigungsobjekten wie Sieben oder auch Erlenmeyerkolben.



EINSÄTZE

Verschiedene Einsätze bieten die Möglichkeit für die Aufnahme von Gläsern oder kleinen Körben, damit empfindliche Reinigungsobjekte kosteneffizient gereinigt werden.



KÜHLSCHLANGEN

Die Kühlschlange aus Edelstahl wird an einen Umlaufkühler angeschlossen und dient der Senkung/Stabilisierung der Temperatur im Ultraschallbad wenn Thermostabilprozesse gefordert sind.



LÄRMSCHUTZBOX

Die Lärmschutzbox dämpft den Lärm des eingestellten Ultraschallgeräts durchschnittlich um 75%. Entstehende Dämpfe werden über einen schalldämpften Ablass abgesaugt.



TROCKNER

Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die Reinigungsobjekte sehr anwendersicher und materialschonend im Elmadry TD (unser Warmluft- und Kaltlufttrockengerät) getrocknet.



Mit der richtigen Dosierung der Elma Chemie zum optimalen Reinigungsergebnis.

Im hauseigenen Verfahrenslabor erarbeiten qualifizierte Chemiker hochwirksame Produkte für verschiedene Reinigungsverfahren, die bei Elma produziert werden und in unterschiedlichen Branchen ihre Anwendung finden.

Branchenlösung

Elma Luxury Clean.

Ob Aufhellung oder Entfernung von Fetten, Ölen oder Poliermitteln – die unterschiedlichen Produkte dieser Serie ermöglichen erstklassige Reinigungsergebnisse bei Uhren und Schmuck und stellen die Langlebigkeit der verwendeten Materialien sicher.

Elma Opto Clean.

Elma Opto Clean unterstützt die Brillenreinigung – sowohl Kunststoff- und Metallgestelle als auch Glasbeschichtungen werden schonend gereinigt. Hersteller von Präzisionsoptiken profitieren von rückstandsfreien Reinigungsergebnissen.

Elma Tec Clean.

Die Reinigerpalette von Elma ist auf sehr unterschiedliche Reinigungsaufgaben in der industriellen Teilereinigung ausgelegt. Folgeprozesse wie Beschichtungen sind nach der Ultraschallreinigung sicher und qualitativ hochwertig durchführbar.

Elma Lab Clean.

Die Reinigerpalette für das Labor ist auf die Bedürfnisse der Instrumente und Glaswaren der Analyselabore ausgelegt. Alle Reiniger dienen zur intensiven Reinigung im Ultraschall – diese Reiniger-Serie ist auch für Laborspülautomaten geeignet.

Optimales Reinigungsergebnis.

Unser Spezialgebiet sind die ganz harten Fälle. Denn hier kommt die Qualität unserer Produkte besonders gut zur Geltung.

Interessiert?

sales@elma-ultrasonic.com





Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17
78224 Singen (Germany)

www.elma-ultrasonic.com

